



颚式粉碎机 BB 300

多功能单元，重点关注进料尺寸

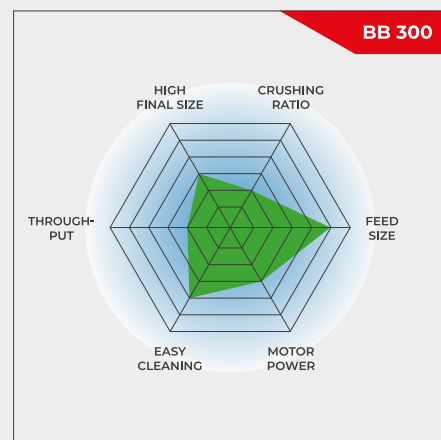
?????BB 300进料口尺寸高达130*130 mm, 是??????130????????????????????1-40 mm????????? ??????????????????
?5 mm (d 90) ??????????26??????BB 300??????600 kg/h?

RETSCH 颚式破碎机系列有 8 种不同规格。产量和最终细度取决于破碎机类型、所选间隙宽度和样品材料的破碎特性。

设计坚固、操作和清洁简单是 RETSCH 颚式破碎机型号的特点。少量样品可分批处理，大量样品可连续操作；

稳固 & 多功能

- | 完美的破碎效果
- | 各种无污染的研磨材质
- | 零点调整磨损补偿
- | 连续鄂板间隙设置
- | 研磨腔易于清洁
- | 适合连续研磨
- | 吸尘接头



多功能单元，重点关注进料尺寸

颚式粉碎机 BB 300

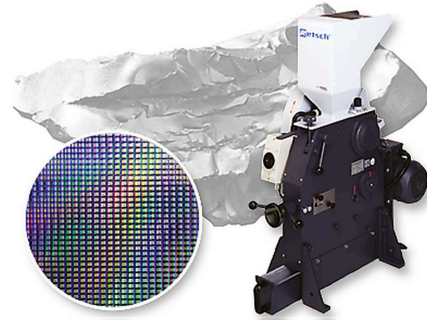
优于细节

BB 300 颚式破碎机设计坚固，操作和清洁简单。对于不超过 35 升的样品量，BB 300 可以分批使用；对于更大的样品量，则可以连续操作。

破碎后的样品收集在一个可移动的收集器中。

主轴调节装置中集成的贝勒维尔弹簧垫圈可提供额外的过载保护。移动破碎臂的偏心主轴由坚固的制动电机通过三角皮带驱动。最大的皮带轮还充当飞轮，以确保均匀平稳的运行。BB 300 颚式破碎机采用免维护、免润滑的滑动轴承。

????????????????????BB 300????????????????????
 ???
 ?????????????????????



生产线版本

BB 300??
 ???

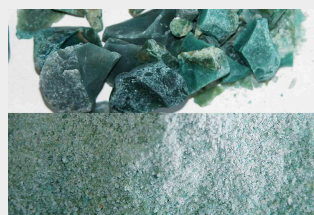


颚式粉碎机 BB 300
典型样品材料

RETSCH强大的颚式破碎机非常适合对建筑材料、矿石、花岗岩、氧化物陶瓷、石英、矿渣、硅、煤、钨合金、水泥熟料等进行初步破碎。



混凝土



玉制品



玻璃



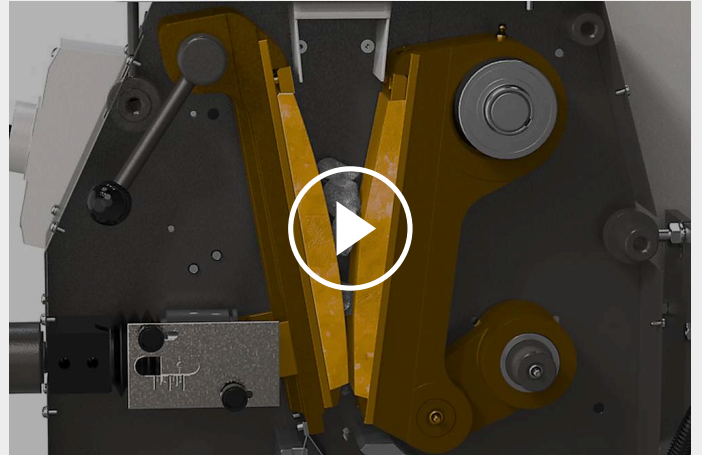
煤炭

为了找到最好的解决方案，请访问我们的应用数据库。

颚式粉碎机 BB 300

作用原理

BB 300??
??
??
????????????



[点击观看视频](#)

颚式粉碎机 BB 300

技术参数

应用	粗粉碎
应用领域	化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷
样品特征	中硬性, 硬的, 脆性的, 硬的
粉碎原理:	压力
最大进样尺寸	小于 1 3 0 毫米
最终出料粒度 *	< 5 mm
处理量*:	600kg/h
研磨套件材料:	锰钢, 不锈钢, 碳化钨, 钢 1.1750 (防重金属研磨)
颚板宽度	138 x 198 mm
研磨间隙宽度调节	1 - 40 mm
间隙宽度显示	规模
零点-校准	是
可翻置漏斗	是
加配吸尘器	是
安装装备型供货	可选项
接收槽容积	27.5 l / 35.4 l
驱动	三相电机
驱动功率	3.0 kW
电源数据:	不同电压
电源接头:	三相
防护类型	IP 54
机体尺寸 (宽x高x纵深)	670 x 1450 x 1600 mm
净重	~ 700 kg
标准	CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响

www.retsch.cn/bb300

ORDER DATA

BB300颚式破碎机



**Jaw Crusher BB 300 complete with breaking jaws and wearing plates
(please order collecting receptacle separately)**

				粉碎颚板 / 刮磨板
20.054.1001		BB 300	3/N~ 400 V, 50 Hz	粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制
20.054.1003		BB 300	3/N~ 400 V, 50 Hz	不锈钢 / 不锈钢
20.054.1013		BB 300	3/N~ 400 V, 50 Hz	氧化锆 / 不锈钢
20.061.0001	 	BB 300	3~ 400 V, 50 Hz	tungsten carbide / tungsten carbide, all parts coming into contact with the sample are heavy-metal-free
20.054.1006		BB 300	3/N~ 400 V, 50 Hz	steel 1.1750 / steel 1.0344, for grinding without heavy-metal contamination

其余可选的电源配置机型价格相同


JAW CRUSHER BB 300 VERSION FOR INTEGRATION

Version for integration into a system at the customer's location, with manufacturer's declaration according to EC machine directive, with three-phase motor (voltages on request), without hopper and protective motor switch

20.057.1001		BB 300	粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制
20.057.1002		BB 300	不锈钢 / 不锈钢

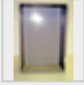COLLECTING RECEPTACLES BB 300


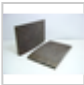
05.045.0048		收集容器 镀锌钢 27.5升
-------------	---	----------------------

05.045.0049		收集容器 塑料 35.4升
22.906.0001		收集容积支架, 负重150kg



BB 300配件

1)

BREAKING JAWS BB 300

22.048.0007		颚板 锰钢 1对
22.048.0008		颚板 不锈钢 1对
22.048.0021		颚板 碳化钨 1套
22.048.0025		颚板 碳化钨 1 set, for jaw crusher 20.061.0001
22.048.0019		颚板 1.1750钢 1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

WEARING PLATES BB 300

22.711.0004		摩擦板 不锈钢 1对
22.711.0014		摩擦板 碳化钨 1 pair, for jaw crusher 20.061.0001
22.711.0013		摩擦板 1.0344钢 1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

FURTHER ACCESSORIES

02.785.0273

Infeed hopper for batch loading

22.351.0004



三角皮带, 1套(4件)